

Vet-PDA Occluder™

Dispositivo implantable para cerrar un conducto arterioso persistente



Vet-PDA Occluder™

El Vet-PDA Occluder™ es un dispositivo implantable de forma permanente para cerrar un conducto arterioso persistente de forma segura y eficaz. Fabricado con materiales biocompatibles de alta calidad, el Vet-PDA Occluder™ se ha diseñado de forma específica para la anatomía de pequeños animales, como perros y gatos, con un peso inferior a 3 kg, garantizando su correcto funcionamiento y evitando posibles complicaciones.

Beneficios:



- Eficacia: El dispositivo garantiza un cierre seguro y permanente del conducto arterioso persistente, mejorando la circulación sanguínea y la salud del animal.

- Seguridad: Fabricado con materiales biocompatibles, como el Nitinol, el dispositivo minimiza los riesgos de rechazo o complicaciones postoperatorias.



- Adaptado al uso veterinario: Mayor flexibilidad del coil, mismo catéter introductor de 4Fr con una longitud optimizada de 55cm y punta en curva específica para mejorar la alineación con el dispositivo durante las maniobras de implantación.

- Facilidad de Implante: Su diseño permite una colocación sencilla y rápida, reduciendo el tiempo quirúrgico y los riesgos asociados mediante un tratamiento no invasivo.




- Recuperación más rápida: Gracias a su sencilla colocación y mínima invasión, el dispositivo permite una recuperación más rápida y menos dolorosa para la mascota, reduciendo el tiempo de hospitalización y las posibles complicaciones postoperatorias.

Características Técnicas:

- Disco en espiral de Nitinol para ductus arteriales de hasta 4 mm.
- Sistema pre- montado.
- Refuerzo distal para evitar el retroceso.
- Sistema de liberación con marcas radiopacas.
- Flexible y de diseño adaptivo que permite una liberación precisa y segura del coil.
- Reposicionable y recuperable antes de su liberación.
- Cierre inmediato.
- De un solo uso.
- Valido para todos los tipos de PDA.

Vet-PDA Occluder™

Ficha Técnica:

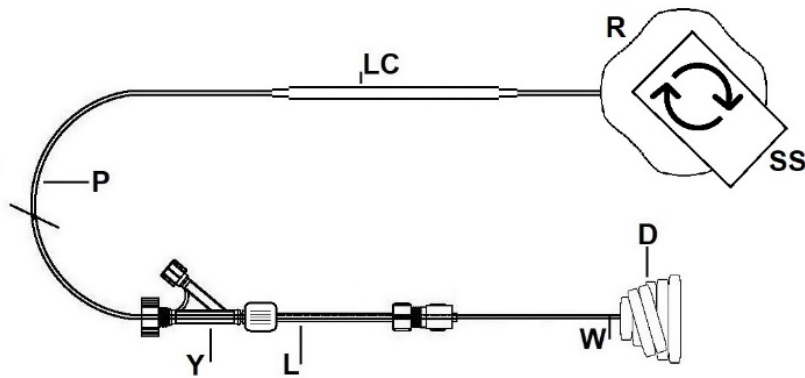

Nombre Comercial	Vet-PDA Occluder™
(D) Dispositivo	Nitinol SE 508
(W) Alambre Guía	Nitinol SE 508
(L) Loader	Polycarbonato, HDPE, PTFE
(Y) Llave Y	Polycarbonato Transparente
(P) Pusher	Acero Inoxidable 1.4301
(LC) Catéter de Carga	HDPE w/ 20% BaSO4
(R) Manubrio Liberación	ABS
(SS) Sello Seguridad	Papel Autoadhesivo
Catéter Angiográfico	Pebax
Esterilización	Óxido de Etileno (EO)
Presentación	Envase Individual Estéril
Conservación	Temperatura y Humedad Normales
Fabricante	Evomed S.L.U. Ctra. Torrejón-Ajalvir Km. 5,2 28864 Ajalvir (Madrid) España

Vet-PDA Occluder™

Referencias:

Referencia	Distal x Prox. Diámetro Coil	Tipo	Lc (mm)	Catéter Implantación	Longitud Catéter
VETPDA000404	4 x 4 mm	FLEX	3.5	4 Fr	55 cm
VETPDA000504	5 x 4 mm	FLEX	3.5	4 Fr	55 cm
VETPDA000605	6 x 5 mm	FLEX	3.5	4 Fr	55 cm
VETPDA000706	7 x 6 mm	FLEX	4.5	4 Fr	55 cm

El Vet-PDA Occluder™ es la elección preferida por veterinarios de todo el mundo debido a su eficacia comprobada y resultados excepcionales en el tratamiento del conducto arterioso persistente en perros y gatos. Con tecnología de vanguardia y materiales de alta calidad, el Vet-PDA Occluder™ garantiza la mejor solución para cerrar de manera segura y efectiva el conducto anómalo, brindando a las mascotas una vida más saludable y activa.

Contacto:

Distribuidor

B. Braun Vet Care España
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí, Barcelona
España
Tel: +34 935 866 200
www.bbraun-vetcare.es
vet.es@bbraun.com

Fabricante

Evomed S.L.U.
Carretera Torrejón-Ajalvir Km. 5,2
28864 Ajalvir, Madrid
España
Tel: +34 918 874 220
www.evomedvc.com
info@evomedvc.com